


# Referentiekaart voor de specialist



## De L300 FS-manchet plaatsen

- 1 Bevestig het persoonlijke inzetstuk aan de L300 FS-manchet.
- 2 Schuif de persoonlijke bandhoes over de L300 FS-manchetband.
- 3 Veeg het onderbeen met een zachte, vochtige doek af. Strek het onderbeen vervolgens enigszins uit.
- 4 Wanneer de elektrode(n) aan de L300 FS-manchet zijn bevestigd, plaatst u de manchetlocator onder de knieschijf. Bevestig de bandriem rond de houder van de RF-stimulator.
- 5 Sluit de L300 Plus-regeleenheid aan op de configuratiehouder. Programmeer stimulatie-instellingen om neutrale dorsiflexie/eversie te bereiken. Programmeer loop/trainingsinstellingen.



Persoonlijk inzetstuk

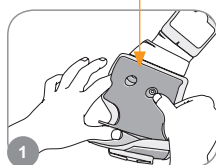

Bandhoezen


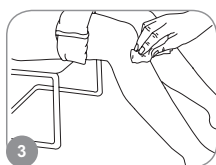
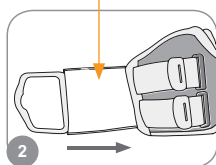


Locator

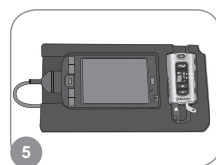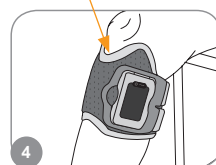


## De Dij FS-manchet plaatsen




- 1 Maak de elektroden van de Dij FS-manchet nat.
- 2 Bevestig de elektroden aan de Dij FS-manchet.
- 3 Pas de verlengstang aan.
- 4 Veeg de dij met een zachte, vochtige doek af. Plaats de Dij FS-manchet op de dij en plaats hierbij de locator met een tussenruimte van drie vingerbreedten zo dicht mogelijk bij de knieholte of knieschijf.
- 5 Centreer de verlengstang op de middellijn van de dij. Maak de banden van de Dij FS-manchet vast.
- 6 Programmeer de stimulatie-instellingen terwijl de patiënt zit om de gewenste kniebuiging of kniestrekking te bereiken.
- 7 Pas de stimulatie-instellingen aan terwijl de patiënt staat. Programmeer loop/trainingsinstellingen.

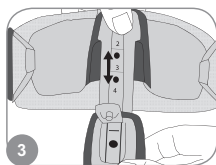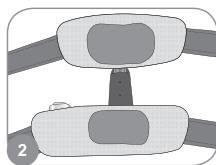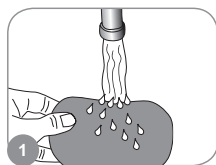

Locator

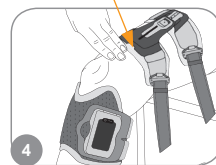

Verlengstang

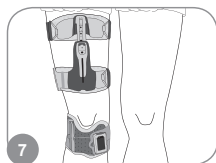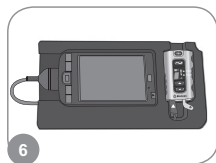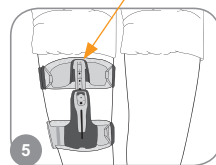

**Alleen Rx (Uitsluitend VS)**

## Het NESS L300 Plus-systeem programmeren

- 1 **Meld u aan bij de L300 Plus Intelli-Gait®-software.** Selecteer een patiëntrecord en druk op **Openen** of maak een nieuw patiëntrecord en druk op **Nieuw**.
- 2 **Selecteer Systeemconfiguratie.** Selecteer **Alleen L300**, **L300 en Dij Hamstrings**, of **L300 en Dij Quadriceps**.

### De L300 programmeren


- 3 **Programmeer stimulatie-instellingen.** Druk op **Stim** en het **tabblad L300**. Pas stimulatie-instellingen aan. Druk op **Test** om stimulatie in te schakelen. Druk op **Stop** om stimulatie te stoppen.
- 4 **Programmeer loopinstellingen.** Druk op **Lopen** en het **tabblad L300**. Pas loopinstellingen aan. Druk op **Test** om alleen stimulatie in de L300 in te schakelen. Druk op **Stop** om stimulatie te stoppen.

### De Dij programmeren

- 5 **Programmeer stimulatie-instellingen.** Druk op **Stim** en het **tabblad Dij**. Pas stimulatie-instellingen aan. Druk op **Test** om stimulatie in te schakelen. Druk op **Stop** om stimulatie te stoppen.
- 6 **Programmeer loopinstellingen.** Druk op **Lopen** en het **tabblad Dij**. Pas loopinstellingen aan. Druk op **Start** om stimulatie in beide FS-manchetten in te schakelen. Druk op **Stop** om stimulatie te stoppen.



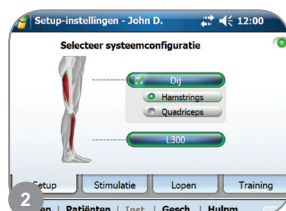

### Trainingsinstellingen programmeren

- 7 Druk op het **tabblad Training** en selecteer **Beide**, **Alleen dij** of **Alleen L300**. Programmeer trainingsinstellingen. Druk op **Start** om stimulatie in te schakelen. Druk op **Stop** om de stimulatie uit te schakelen.



**Opmerking:**  
Met **Start** wordt stimulatie in beide FS-manchetten geactiveerd.

## De klinische modus gebruiken

1. Schakel de L300 Plus-regeleenheid uit. Druk op de  minus-knop en houd deze *ingedrukt*. Druk *kortstondig* op de  aan/uit-knop.
2. Druk op de  modusknop en houd deze *ingedrukt* om stimulatie in beide RF-stimulators tegelijk te starten. Laat de  modusknop los om stimulatie te stoppen.

Wereldwijd hoofdkantoor  
Bioness Inc  
25103 Rye Canyon Loop  
Valencia, CA 91355  
Telefoon: 800-211-9136  
E-mail: [info@bioness.com](mailto:info@bioness.com)  
Website: [www.bioness.com](http://www.bioness.com)

Vervaardigd door: Bioness Neuromodulation Ltd.  
Een Bioness Inc bedrijf  
19 Ha'Haroshet Street  
PO Box 2500  
Industrial Zone  
Ra'Anana 43654, Israël

  
Zie handleiding voor  
de specialist

EC REP

Gevolmachtigd vertegenwoordiger Europa  
NESS Europe B.V.  
Stationsweg 41  
3331 LR Zwijndrecht, Nederland  
Telefoon: +31.78.625.6088  
E-mail: [international@nl.bioness.com](mailto:international@nl.bioness.com)  
Website: [www.bioness.com](http://www.bioness.com)